



Wir verstehen Hören.

bruckhoff

PRODUKTKATALOG

BRUCKHOFF HÖRSYSTEME PORTFOLIO.




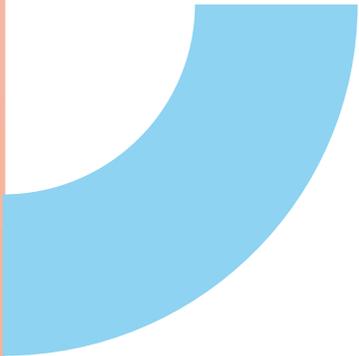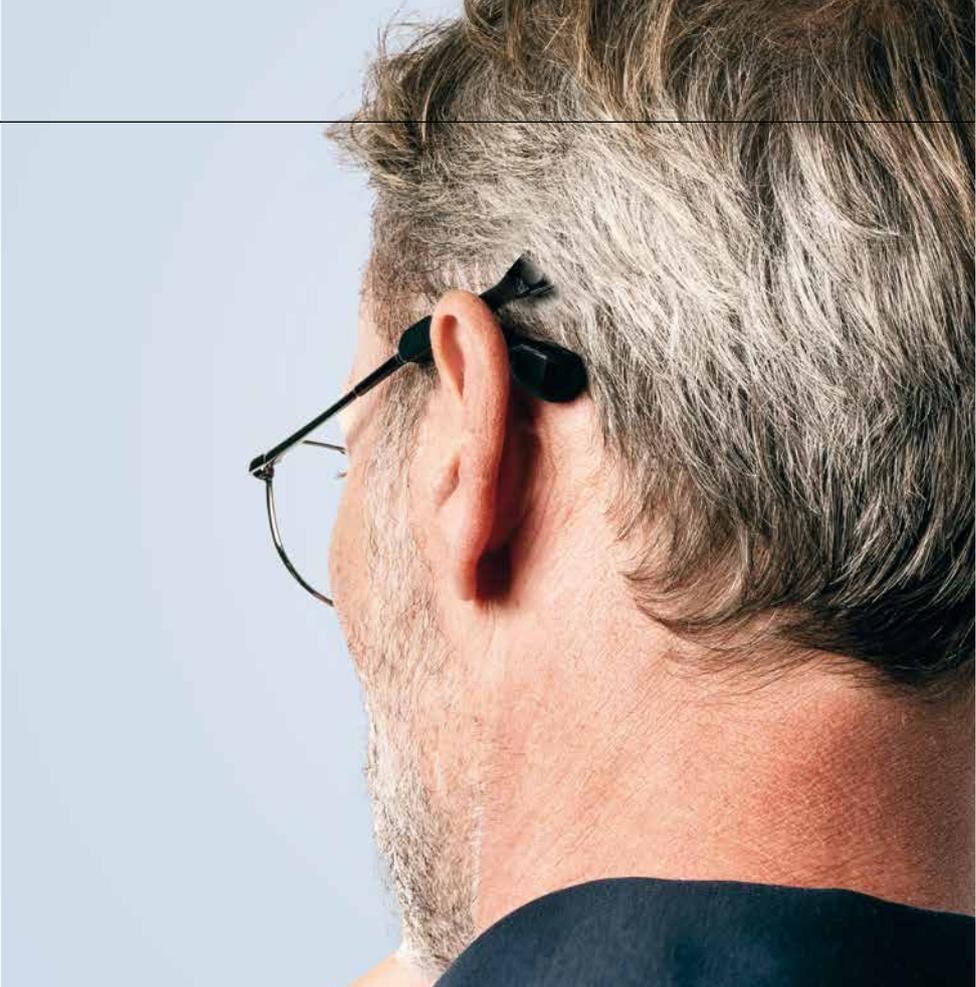



DER SPEZIALIST FÜR KNOCHENLEITUNG.

Bruckhoff entwickelt und produziert technisch und optisch innovative Hörsysteme und Medizinprodukte. Zu den bekanntesten Eigenprodukten gehören die Hörbrille la belle sowie Produkte aus dem Bereich der Knochenleitung.

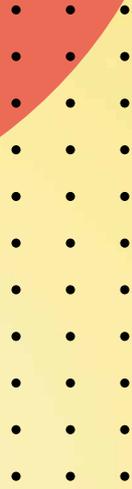

JUNIOR KNOCHENLEITUNG. KINDER-HÖRSYSTEM.

STIRNBÄNDER MIT KNOCHENLEITUNGSHÖRSYSTEM
IN VERSCHIEDENEN FARBEN.



SO LEICHT, SO GUT.

Unbeschwert hören, unbeschwert spielen: Die Kombination von Stirnband und Hörmodul bietet Ihrem Kind viele Vorteile. So ist das junior-Hörsystem,

- für Ihr Kind kaum spürbar,
- ausgesprochen komfortabel zu tragen,
- automatisch richtig am Kopf positioniert,
- für andere nahezu unsichtbar.

Ein Kinder-Hörsystem von hohem Tragekomfort: angenehm, komfortabel und dezent. Das junior-Hörsystem ist „Made in Germany“. Ein Qualitätsprodukt, an dem Ihr Kind lange Freude haben wird.

KLEIN, ABER OHO.

- von außen kaum sichtbar
- verstellbares Stirnband
- einfache und schnelle Anpassung
- keine Operation notwendig
- realitätsnaher guter Klang
- Reduktion von Störgeräuschen

MODISCHE STIRNBÄNDER.

Die Kunden erhalten eine tolle Auswahl an schönen und modischen Stirnbändern für das Kind. Diese sind bereits für die einfache Montage des junior-Hörsystems vorbereitet.

Auch kundeneigene Stirnbänder können für den Einsatz des junior-Hörsystems angepasst und umgearbeitet werden.



- Windgeräuschreduzierung
- Zwei-Stufen-Rückkopplungsunterdrückung
- Phonak Roger System kompatibel
- Lautstärkeregelung & Programmwahl deaktivierbar
- Anpassung mit Knochenleitungs-Fitting-Software
- kompatibel für NOAH und NOAH Link ab 4.3

LA BELLE KNOCHENLEITUNG. BRILLEN-HÖRSYSTEM.

EINZIGARTIGE KOMBINATION AUS
BRILLE UND HÖRMODUL.



EINFACH GENIAL: DIE BRILLE WIRD ZUM HÖRSYSTEM.

Das patentierte Hörmodul wird technisch und optisch so raffiniert in die Brille integriert, dass der zusätzliche Nutzen der Brille nahezu unsichtbar ist. Durch die gewohnte Lage der Brille am Kopf ist das neue Hörsystem

- automatisch ideal am Kopf positioniert,
- für den Träger nicht spürbar,
- für andere kaum sichtbar.

Ein Hörsystem von hohem Tragekomfort: angenehm, komfortabel und dezent. Das la belle Hörsystem ist „Made in Germany“. Ein Qualitätsprodukt, an dem der Träger garantiert lange Freude haben wird.



Praktisch. Ob Arbeits-, Lese- oder Sonnenbrille: Es wird nur ein Hörmodul benötigt. An die Brille anklicken und fertig!

TECHNIK VOM FEINSTEN.

- realitätsnaher, guter Klang
- automatische Anpassung der Hörverständlichkeit
- gutes Hören in geräuschvoller Umgebung
- Ausblenden von Störgeräuschen
- Windgeräuschreduzierung
- Zwei-Stufen-Rückkopplungsunterdrückung
- Anpassung mit Knochenleitungs-Fitting-Software
- kompatibel für NOAH und NOAH Link ab Vers. 4.3
- Bügelenden kalt biegsam
- Hörerposition dadurch flexibel
- Kammerdeckel gold, silber oder anthrazit möglich
- Batteriefachdeckel Größe 13
- Umstecken auf verschiedene Brillen möglich
- nahezu alle Brillen für das Klicksystem nutzbar





HEADSET KNOCHENLEITUNG. HEADSET-HÖRSYSTEM.

INNOVATIVES HEADSET WELCHES
SICH JEDER KOPFFORM ANPASST.



AUFSETZEN UND FERTIG.

Das patentierte Hörmodul befindet sich an einem weitenverstellbaren Metallbügel. Durch die vorgegebene Lage der Hörmodule ist das neue Hörsystem

- mit wenigen Handgriffen am Kopf positioniert,
- leicht und somit kaum spürbar.


Das headset-Hörsystem ist „Made in Germany“. Ein Qualitätsprodukt, an dem der Träger garantiert lange Freude haben wird.

TECHNIK VOM FEINSTEN.

- einfache Bedienbarkeit
- realitätsnaher, guter Klang
- automatische Anpassung der Hörverständlichkeit
- perfektes Hören in geräuschvoller Umgebung
- Ausblenden von Störgeräuschen
- Windgeräuschreduzierung
- Zwei-Stufen-Rückkopplungsunterdrückung

VON KLEIN BIS GROSS.

Der leichte und dezente Metallbügel lässt sich über die beiden Weitenversteller schnell und einfach an verschiedene Kopfgrößen anpassen. Zusätzlich kann die Biegung des aus medizinischem Federstahl bestehenden Metallbügels verändert werden. So kann das Hörsystem sehr schnell an der richtigen Stelle platziert werden.

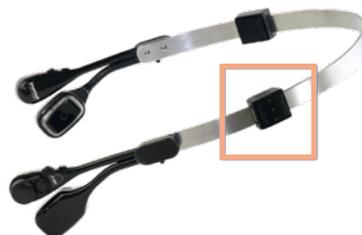

- Anpassung mit Knochenleitungs-Fitting-Software
- kompatibel für NOAH und NOAH Link ab Vers. 4.3
- Bügelenden kalt biegbare
- Hörerposition dadurch flexibel
- Kammerdeckel gold, silber oder anthrazit möglich
- Batteriefachdeckel Größe 13
- Kopfbügel verstellbar

BC-FIT SOFTWARE.

EINFACH VERWALTEN.

FITTINGSOFTWARE FÜR ALLE
BRUCKHOFF PRODUKTE..


FITTINGSOFTWARE IM ÜBERBLICK.

Mit der Fitting Software BC-Fit haben Sie ein Tool zur Hand mit dem Sie alle Ihre alltäglichen Aufgaben problemlos meistern können. BC-Fit eignet sich für:


- Verwaltung Ihrer Kunden
- Auslesen Geräte, Programmierung und Anpassung
- Beratung (Data Logging / Anpassungsvorschläge)
- Übersicht über Informationen im Hörsystem

Die optimale Position des Hörers wird mit Hilfe eines Tongenerators ermittelt. Ebenso ist ein „First Fit“ auf Knopfdruck möglich.

Laden Sie sich jetzt unsere BC-Fit Fitting Software unter www.bruckhoff.com im Bereich „Downloads“ herunter.

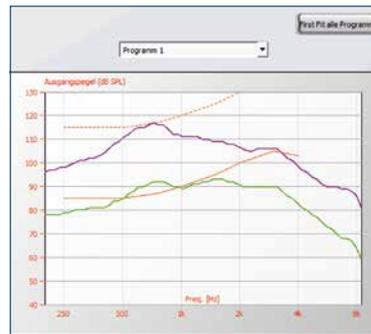

One-Click. Durch vorgespicherte Profile können Sie die Hörsysteme Ihrer Kunden mit einem Klick konfigurieren und anpassen.

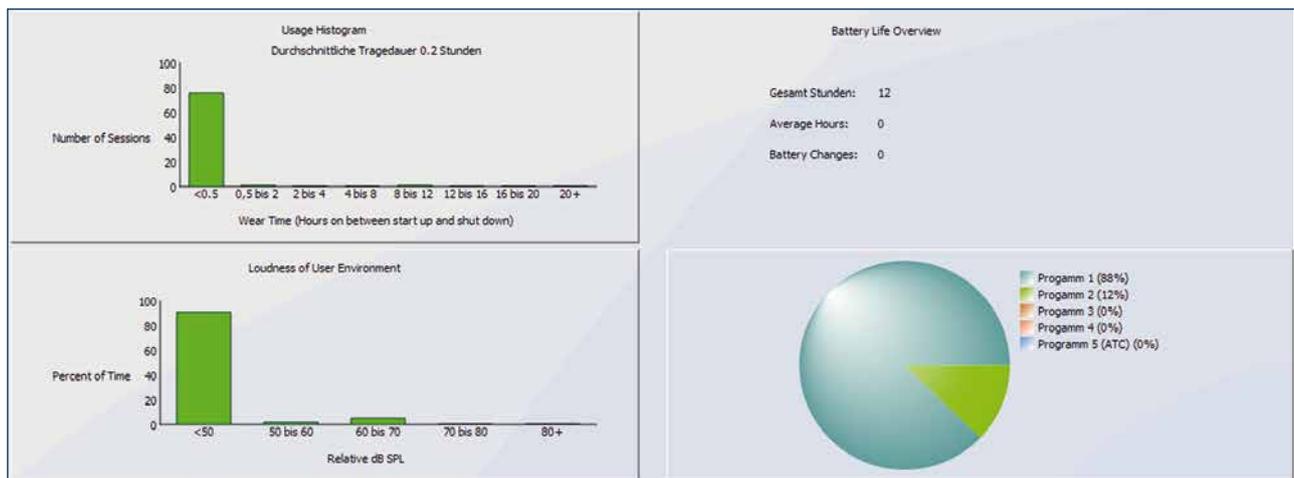

Alles im Blick. Unter dem Punkt Datenhistorie bekommt man Einblick in die Gewohnheiten des Kunden, z.B. wie oft wurde am VC-Steller die Lautstärke geändert oder wie oft wurde Programm 2 benutzt usw. Die Darstellung zeigt einen Ausschnitt der Datenhistorie.



Praktisch. Die rechte und linke Seite des Hörsystems können in einer übersichtlichen Darstellung einfach und intuitiv angepasst werden.

MATRIX MODULE

LA BELLE BC KNOCHENLEITUNG

| EIGENSCHAFTEN | LA BELLE BC BRILLE | | LA BELLE JUNIOR BC STIRNBAND | LA BELLE HEADSET BC KOPFBÜGEL |
|----------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|
| | LA BELLE BC D50 | LA BELLE BC D70 | LA BELLE JUNIOR BC D50 | LA BELLE HEADSET BC D50 |
| WDRC | 16 Kanäle | 16 Kanäle | 16 Kanäle | 16 Kanäle |
| Rückkopplungsunterdrückung | 4. Generation | 4. Generation | 4. Generation | 4. Generation |
| Geräuschreduzierung | • | • | • | • |
| Windgeräuschunterdrückung | • | • | • | • |
| MPO | • | • | • | • |
| Lautstärkeregler | • | • | • | • |
| Kanäle | 16 | 16 | 16 | 16 |
| In situ Tongenerator | • | • | • | • |
| Programme | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Taster | Programme | Programme | Programme | Programme |
| Programmwahlton | • | • | • | • |
| Batteriewarnton | • | • | • | • |
| Telefonspule | • | • | • | • |
| Mikrofon | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Adaptiv direktional | | • | | |
| Audioeingang | • | • | • | • |
| Phonak Roger X Empfänger, Option | | | • | |
| Batteriegröße 13 | • | • | • | • |
| Anpasssoftware speziell für BC | BC-Fit | BC-Fit | BC-Fit | BC-Fit |
| NOAH ab Vers. 4.3 | • | • | • | • |
| NOAH Link | • | • | • | • |