

freestyle CL 210 + Tinnitusmasker + Potentiometer




Hörsystem und Tinnitusmasker in einem Gerät: z.B. (P steht für Programm)
 P1 = Mikrofon
 P2 = Noiser (Rauschmodul)
 P3 = Mikrofon und Noiser

Das Rauschsignal ist über ein Poti zuregelbar.

freestyle CL 210 mit Option TID

- modernes, digitales Hörsystem mit regelbaren Noiser
- VC für Lautstärke des Rauschens
- 3 Programme mit Taster wählbar
- 2 Kanal WDRC
- automatische Hörsituationserkennung
- 12 Bänder zur Einstellung der Verstärkung
- MPO
- Rückkopplungsmanagement (bis -17dB)
- Programmwechseltöne und Batteriewarntöne
- Batterietyp 312
- sehr gute Übertragungseigenschaften dank Ex-Hörersystem*
- ideal für die offene Anpassung
- natürlicher Tragekomfort
- individuell und anatomisch anpassbar
- wechselbarer Cerumendefenser
- Schlauch warm formbar
- Farben: titan/transparent




*Ex-Hörer = Hörer direkt im Gehörgang

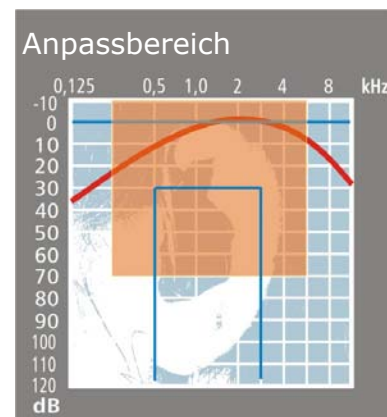

Hilfsmittelpositionsnr: 13.20.03.0310

Technische Daten

		DIN EN 60118-0	DIN EN 60118-7
Max. Ausgangsschalldruckpegel OSPL90	(dB)	119	110
Max. Verstärkung (FOG)	(dB)	49	42
Eingangsbezogenes Eigenrauschen	(dB)	22	22
Frequenzbereich	(Hz)	200-6000	200-6500
Strom	(mA)	1,2	1,2

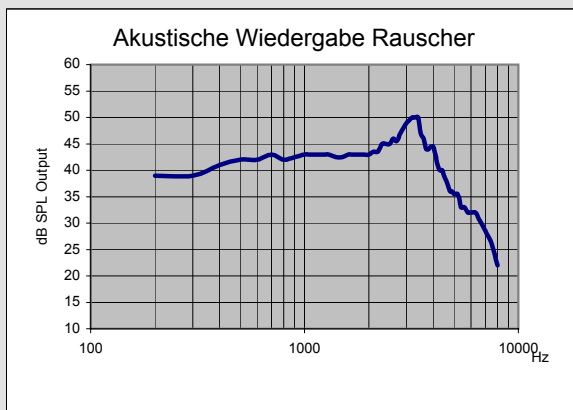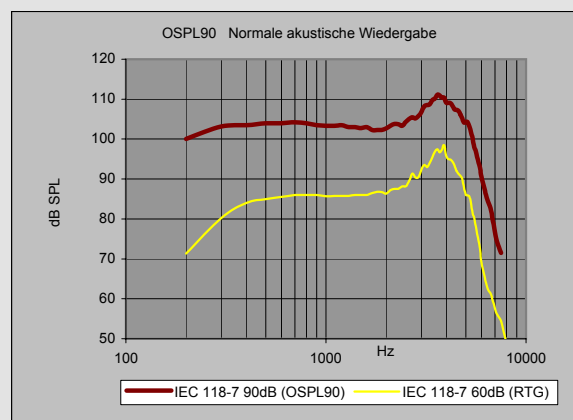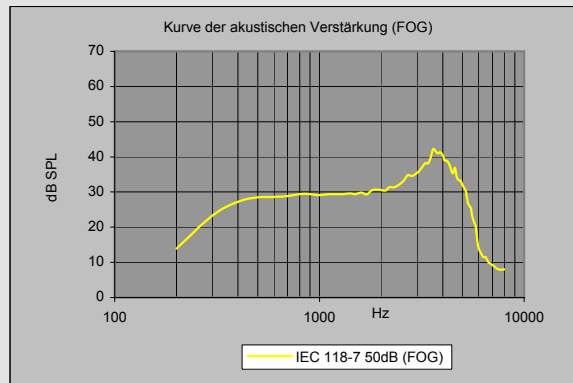

Programmierung:

mit bruckhoff Anpasssoftware und Kabel Siemens CONNEXX

Hilfsmittelpositionsnummer: 13.20.03.0310 Bauartnummer: 2980

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bevor Sie den Programmierstecker einführen, entfernen Sie bitte die Schutzkappe der Programmierbuchse.