


la belle CL 410

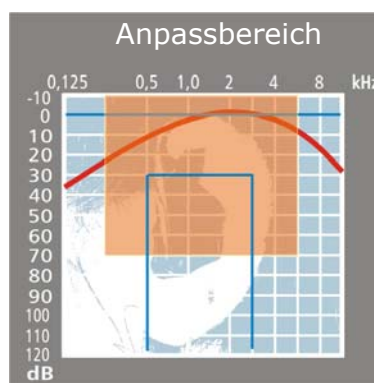

la belle CL 410




- HdO-Brillenmodul, kalt formbar
- 4 Programme mit Taster wählbar
- 4 channel WDRC
- Automatische Hörsituationserkennung
- 12-Bänder zur Einstellung der Verstärkung
- MPO
- Rückkopplungsmanagement (bis -22dB)
- Rauschunterdrückungssystem
- Programmwechseltöne und Batteriewarntöne
- Bateria Typ 312
- Sehr gute Übertragungseigenschaften, dank Ex-Hörersystem*
- Ideal für die offene Anpassung
- Auswechselbarer Cerumendefenser
- Schlauch warm formbar
- Farben: silber-schwarz, anth.-schwarz, gold-braun
- Varianten: mono, stereo, CROS, BiCROS

*Ex-Hörer = Hörer direkt im Gehörgang

TECHNISCHE DATEN

		DIN EN 60118-0	DIN EN 60118-7
Ausgangsschalldruckpegel OSPL90	(db)	119	112
Verstärkung max. FOG (50dB)	(dB)	52	43
Frequenzbereich	(Hz)	200-6500	200-6500
Äquivalentes Eigenrauschen	(dB)	22	22
Strom	(mA)	1,2	1,2

Bitte wenden

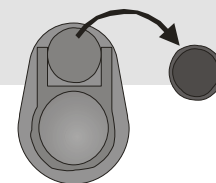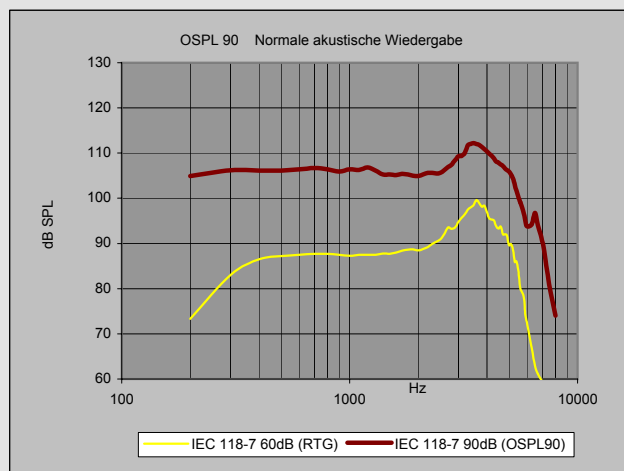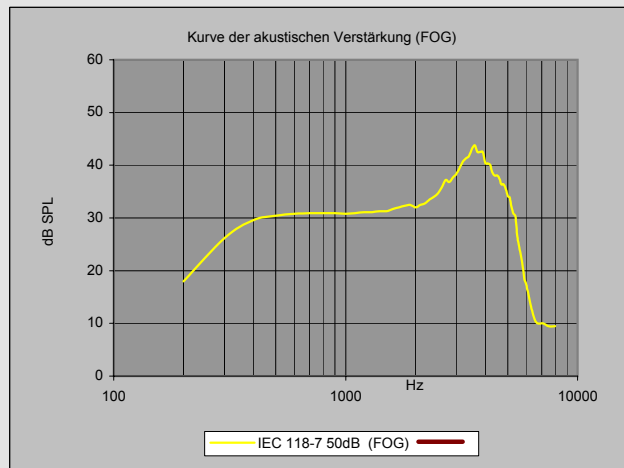

Bevor Sie den Programmierstecker einführen, entfernen Sie bitte die Schutzkappe der Programmierbuchse.

Programmierung:

mit Bruckhoff Anpasssoftware und Kabel Siemens Connexx für die CS44 Buchse der Ia belle

Hilfsmittelpositionsnummer: 13.20.03.1560 Bauartnummer: 2981

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten