


# la belle CL 420



## la belle CL 420

- HdO-Brillenmodul, kalt formbar
- Digitales Hörsystem mit 2-Mikrofontechnologie
- 4 Programme mit Taster wählbar
- 4 Kanal WDRC
- Automatische Hörsituationserkennung
- Richtwirkung mit wählbarer Charakteristik oder automatische Hörsituationsabhängige Richtwirkung
- 12-Bänder zur Einstellung der Verstärkung
- MPO
- Rückkopplungsmanagement (bis -22dB)
- Rauschunterdrückungssystem
- Programmwechseltöne und Batteriewarntöne
- Bateriaartyp 312
- Sehr gute Übertragungseigenschaften, dank Ex-Hörersystem\*
- Ideal für die offene Anpassung
- Auswechselbarer Cerumendefenser
- Schlauch warm formbar
- Farben: silber-schwarz, anth.-schwarz, gold-braun
- Varianten: mono, stereo, CROS




\*Ex-Hörer = Hörer direkt im Gehörgang

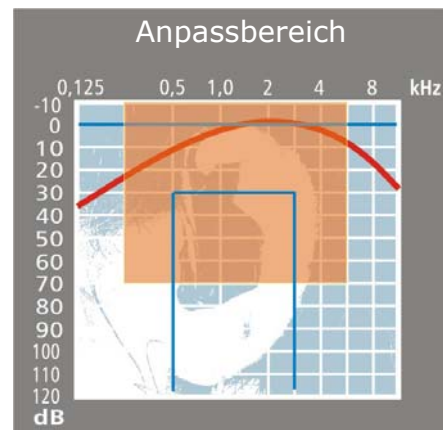

## Technische Daten

		DIN EN 60118-0	DIN EN 60118-7
Max. Ausgangsschalldruckpegel OSPL90	(db)		112
Verstärkung max. 50dB(FOG)	(dB)		43
Frequenzbereich	(Hz)		200-6500
Äquivalentes Eigenrauschen	(mA)		22
Strom			1,3

bitte wenden

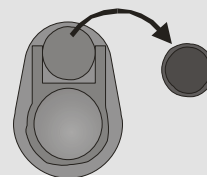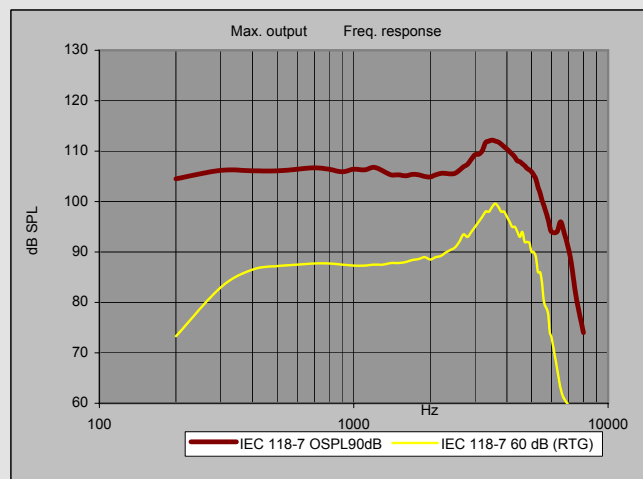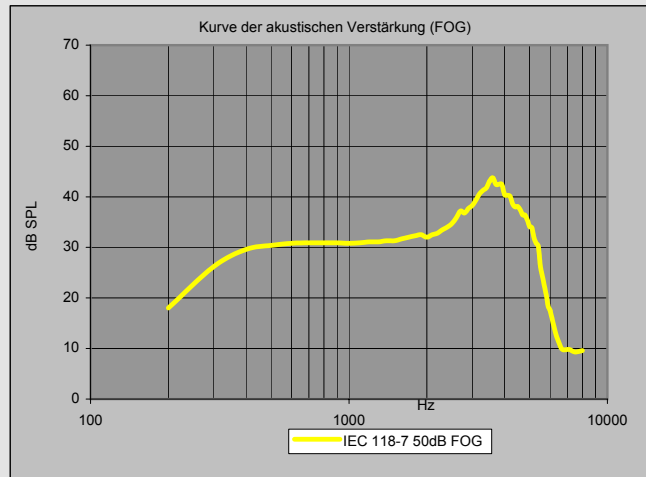

Bevor Sie den Programmierstecker einführen, entfernen Sie bitte die Schutzkappe der Programmierbuchse.

**Programmierung:**

mit Bruckhoff Anpasssoftware und Kabel Siemens Connexx für die CS44 Buchse der la belle

**Hilfsmittelpositionsnummer: 13.20.03.1559**

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten