


la belle

# la belle Motion 300

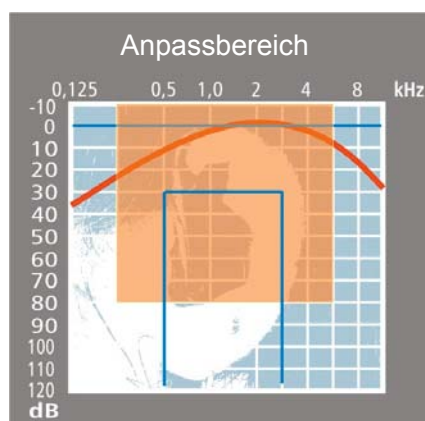

## la belle Motion 300




- HdO-Brillenmodul, kalt formbar
- Automatisches, adaptives Richtmikrofon-System
- 8 einstellbare Frequenzkanäle
- 8 einstellbare AGC-I Kompressionskanäle
- Breitband AGC-O System
- Störgeräuschreduktion in 8 Kanälen
- Sprachanhebung in 8 Kanälen
- FeedbackBlocker™
- DataLogging
- eWindScreen™
- Batterietyp 312
- Varianten: mono, stereo, CROS
- BiCROS ohne Richtwirkung
- Optional: Programmtaster für individuelle Hörprogramme
- Tek™ telefonieren über Bluetooth, Audioeingang über die Fernbedienung, drahtlose Anbindung z.B. TV mit dem Tek Transmitter

TM Eingetragenes Warenzeichen der SAT

## TECHNISCHE DATEN

		DIN EN 60118-0	DIN EN 60118-7
Ausgangsschalldruckpegel SPL $L_{Amax}$	(db)		119
Verstärkung max.	(dB)		54
Äquivalentes Eigenrauschen	(dB)		24
Frequenzbereich	(Hz)		150-7200
Strom	(mA)		1,0

Bitte wenden

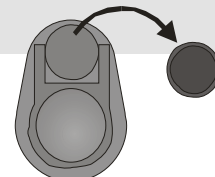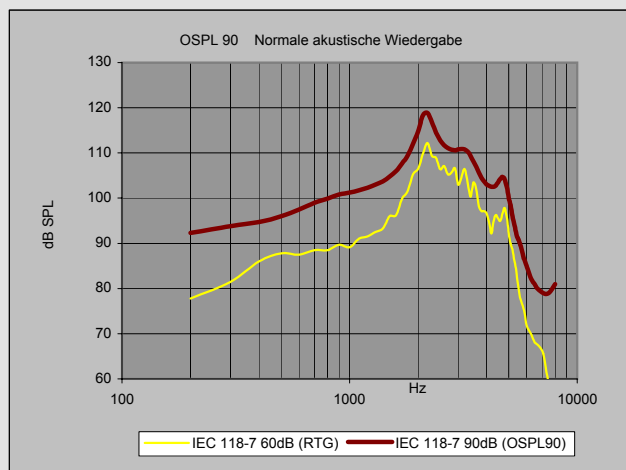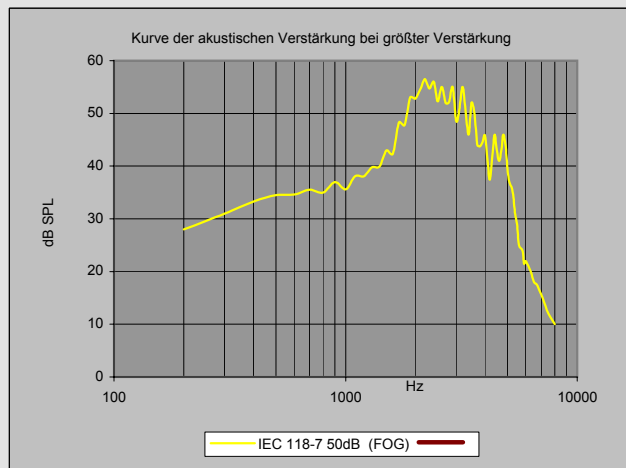

Bevor Sie den Programmierstecker einführen, entfernen Sie bitte die Schutzkappe der Programmierbuchse.

**Programmierung:**

mit Bruckhoff Anpasssoftware und Kabel Siemens Connexx für die CS44 Buchse der la belle

**Hilfsmittelpositionsnummer:** 13.20.03.4748

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten